

オーラルライフガード歯肉刺激ピック[△] (三角ようじ)



Stimulator Pick kit

元口腔衛生学会理事・日本口腔インプラント学会指導医、医学博士：奥寺元プロフェュース！

オクデラ式専用ホルダー


最も効果的な、歯肉マッサージ用器具

世界的に歯肉のケアとして歯肉のマッサージを行う事は歯肉の血流や歯肉粘膜の角化を促進し、有効であることが認められています。

ソフトな北海道白柳(キシリトール入り)の木を使用し、解剖学的歯肉の右側に即して造られた△形(△)は使いどころにも入り、歯を傷つける事が少なく、その2辺ではクリーニングでき、歯肉では、加圧振動を行う事により歯肉にも優しくマッサージ効果が期待できます。施設フランジより有効です。

■ 使用方法

一本切り離し、専用のホルダーにそれぞれ底面を交互に差し込みます。歯肉部に挿入し加圧振動を行います。

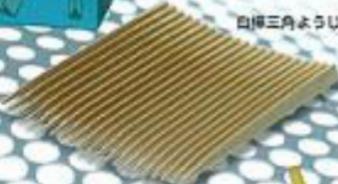

白柳△形




骨周炎・インプラント密閉炎
骨肉
炎症
骨肉除去
加圧振動マッサージで
歯肉四隅のフラー除去



Upper

歯肉部へ加圧振動マッサージ

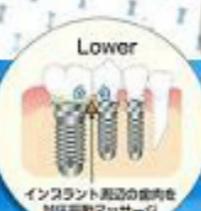

Lower

インプラント周辺の歯肉を
加圧振動マッサージ

インプラント周辺炎の進行

1. 慢性化初期



歯肉炎とインプラント周囲はしっかりと結合している
ところを示しています。歯肉がキットな
あります。

2. 慢性化中期



歯肉が引き離された状態や歯肉の赤みで炎症が
始まっている場合があります。この段階で、歯
肉が剥離したり、歯肉に沿って骨を破壊して
形成される歯肉ポケットが現れます。また歯
肉は腫れたりします。

3. 慢性化終期



歯肉と骨に接する部分などが完全に剥離され
て骨も露出している状態になります。
このような状態になってしまったと、インプラント周辺炎
はなかなか治らなくなってしまうのです。

より早く簡単に安価で効果的。

オクデラ式インプラント関連インツルメント

■ サイナスリフター 商品番号 #001 ■ 即時埋入用エレベーター 商品番号 #002 ■

■ ボーンスプレッディングシステム 商品番号 #003 ■ オステオクラッシャー 商品番号 #004 ■

■ 粘膜骨膜剥離器 商品番号 #005 ■ サージカルステント 商品番号 #006 ■ セーフティー・マルチ抜糸シザーズ 商品番号 #007

【お問い合わせ・資料請求】

オクデラメディカル OKUDEKA MEDICAL

〒114-0002 東京都北区王子2-26-2 ウエルネスオクラビルズ3F

TEL : 03-3919-5111 FAX : 03-3919-5114 E-mail : okudera@carrot.ocn.ne.jp